

defiworld 



**LEBENSRETTUNG**

**KANN EINFACHER SEIN**

**ALS MAN DENKT!**

**Gemeinsam für mehr Herzsicherheit  
im täglichen Leben.**

Besuchen Sie uns online unter:  
[www.defiworld.de](http://www.defiworld.de)





Moderne Medizintechnik kombiniert mit gut geschulten Menschen,  
die wissen, was im Notfall zu tun ist, kann mehr Leben schützen und retten.

*HEARTSAFE ist eine eingetragene Marke der Medical Industrie GmbH & Co. KG.*

Die HEARTSAFE Initiative setzt sich für eine herz sichere Umgebung, in jedem Bereich des Lebens ein.  
[www.heart-safe.de](http://www.heart-safe.de)

## Informationen

Fakten zum plötzlichen Herztod in Deutschland	4
Die Rettungskette - Ein Lebensretter in 5 Schritten	4
Herzstillstand oder Herzinfarkt?	5
Unser Serviceversprechen	6
Forward Hearts Programm	14
AED Einweisung / AED Training	26 - 27
Rettungsmaßnahmen bei plötzlichem Herzstillstand	27



## Defibrillator

LIFEPAK® CR2 AED	7 - 8
HeartSine samaritan® 350P/360P/500P AED	12 - 13
Powerheart® G5 AED	15 - 16
Powerheart® G3 Elite	18
Zoll AED 3	19 - 20



## Ausstattung

LIFEPAK® CR2 Zubehör	9 - 11
HeartSine samaritan® 350P/360P/500P Zubehör	13
Powerheart® G5 AED Zubehör	17
Zoll AED 3 Zubehör	21
Rotaid AED Wandschränke	22 - 23
AED Wahrnehmung	24 - 25



# FAKTEN ZUM PLÖTZLICHEN HERZTOD IN DEUTSCHLAND



**34 %** der Betroffenen sind **unter 65 Jahre alt**



**13 %** der Fälle ereignen sich am Arbeitsplatz



**80%** der Fälle geschehen **ohne vorherige Anzeichen einer Herzerkrankung**



**4 von 5 Herznotfällen** ereignen sich außerhalb der Klinik.




Durch Defibrillation **innerhalb von 3–5 Minuten** nach dem Kollaps können laut ERC\* **Überlebensraten von 50–70 %** erreicht werden.


\*ERC = European Resuscitation Council

\*\*Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) DGUV-Information 204-010

Mehr als  
**100.000**\*\*  
geschätzte jährliche  
Opfer des plötzlichen  
Herzstillstands in  
Deutschland

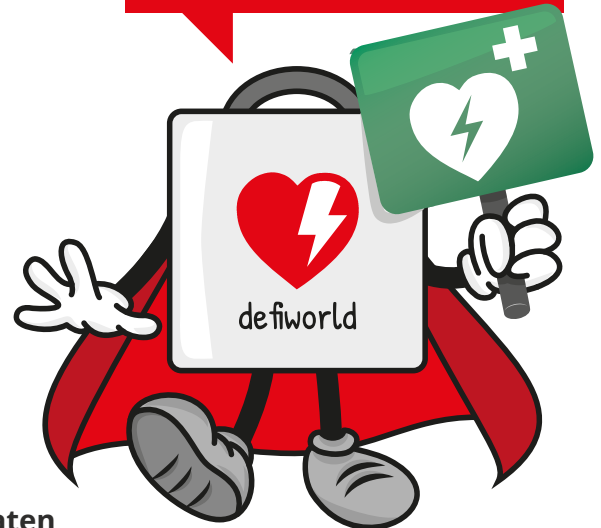

## DIE RETTUNGSKETTE - EIN LEBENSRETTER IN 5 SCHRITTEN

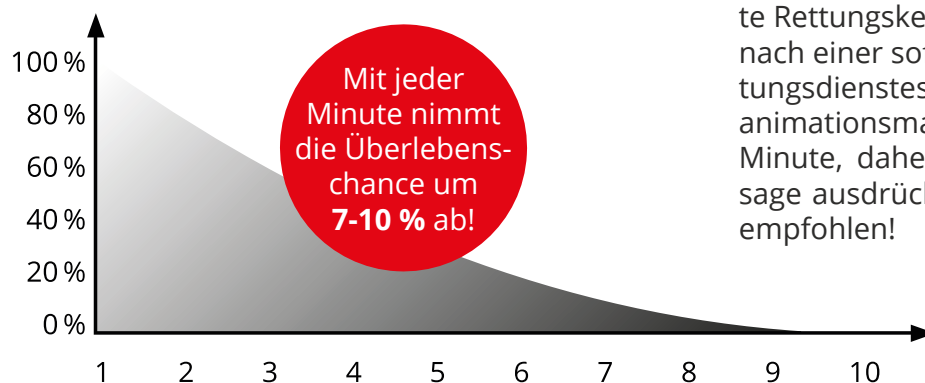

Um die beste Versorgung bei einem Herznotfall zu leisten, hat sich als Vorgehensweise die sogenannte Rettungskette etabliert. Die Rettungskette sieht nach einer sofortigen Benachrichtigung eines Rettungsdienstes den umgehenden Beginn von Reanimationsmaßnahmen vor. Im Notfall zählt jede Minute, daher wird neben einer Herzdruckmassage ausdrücklich der Einsatz eines Defibrillators empfohlen!



# HERZSTILLSTAND ODER -INFARKT?

## Was ist ein Herzstillstand?

Ein Herzstillstand tritt auf, wenn das Herz nicht richtig arbeitet und unerwartet aufhört zu schlagen. Ein spontaner Herzstillstand wird durch eine elektrische Fehlfunktion im Herzen (Arrhythmie), z.B. durch einen Herzinfarkt oder Stromunfall ausgelöst. Da die Pumpaktivität des Herzens gestört ist, kommt es zu einem Kreislaufstillstand. Somit kann das Herz kein Blut mehr ins Gehirn, in die Lunge und in andere Organe pumpen.

## Was passiert bei einem Herzstillstand?

Innerhalb von Sekunden ist die betroffene Person nicht mehr ansprechbar, atmet nicht mehr oder schnappt nur noch nach Luft. Wird die Person nicht behandelt, z.B. mit einem AED, stirbt sie innerhalb von Minuten. Der Herzstillstand ist eine der häufigsten Todesursachen. Jedes Jahr erleiden mehr als 100.000\*\* Menschen in Deutschland einen plötzlichen Herztod.

## Arrhythmie


(unregelmäßiger Herzschlag) des Herzens.

## Was ist ein Herzinfarkt?

Ein Herzinfarkt tritt auf, wenn der Blutfluss zum Herzmuskel blockiert ist. Eine verschlossene Arterie hindert sauerstoffreiches Blut daran, einen Teil des Herzens zu erreichen. Wird die verschlossene Arterie nicht schnell wieder geöffnet, beginnt der Teil des Herzens, der normalerweise über diese Arterie versorgt wird, abzusterben.

## Was passiert bei einem Herzinfarkt?

Die Symptome eines Herzinfarktes, wie starke Schmerzen im Brustkorb, massives Einschnürungsgefühl im Herzbereich, heftiges Brennen, Atemnot, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Erbrechen und Angstschweiß können unmittelbar auftreten. Häufiger beginnen die Symptome jedoch langsam und halten Stunden, Tage oder Wochen an, bis es schließlich zu einem Herzinfarkt kommt. Im Gegensatz zum Herzstillstand hört der Herzschlag bei einem Herzinfarkt in der Regel nicht auf. Je länger die Person unversorgt bleibt, desto größer sind die Schäden. **Bei Frauen können die Symptome eines Herzinfarktes anders sein als bei Männern. Statt starker Schmerzen handelt es sich dabei im Vergleich deutlich häufiger um ein Druck- oder Engegefühl. Frauen sollten daher immer alle Symptome nennen!**

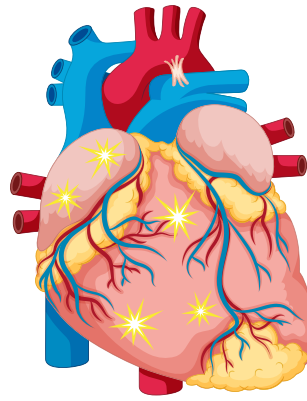

Ein Herzstillstand ist ein „elektrisches“ Problem.

## Was bei einem Herzstillstand zu tun ist:

Ein Herzstillstand kann in einigen Fällen reversibel sein, wenn er innerhalb weniger Minuten behandelt wird. Wählen Sie zuerst die örtliche Notrufnummer und beginnen Sie dann sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Verwenden Sie anschließend so früh wie möglich einen automatisierten externen Defibrillator (AED), sofern verfügbar. Wenn zwei Personen vor Ort sind, um zu helfen, sollte eine Person sofort mit der HLW beginnen, während die andere die örtliche Notrufnummer wählt und einen AED holt.

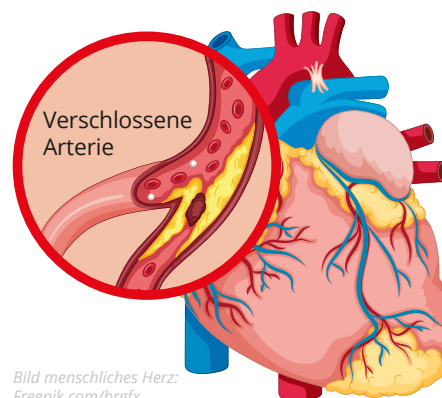


Bild menschliches Herz: Freepik.com/brgfx

Ein Herzinfarkt ist ein „Kreislauf“-Problem.

## Was bei einem Herzinfarkt zu tun ist:

Auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es ein Herzinfarkt ist, wählen Sie die örtliche Notrufnummer. Über die örtliche Notrufnummer gelangen Sie direkt zur Notrufleitstelle. Der Rettungsdienst kann nach seiner Ankunft sofort mit der Behandlung beginnen, dies ist bis zu einer Stunde schneller, als wenn der Patient mit dem Auto in ein Krankenhaus gebracht würde. Patienten mit Brustschmerzen, die mit dem Rettungswagen eingeliefert werden, erhalten im Krankenhaus in der Regel auch schneller eine Behandlung. Tritt die links genannte Symptomatik in Kombination mit einem unbestimmten Gefühl im Brust- oder Rückenbereich sowie mit Luftnot und/oder Kältschweiß auf, warten Sie nicht bis zu Ihrem nächsten Hausarztbesuch, sondern rufen Sie gleich die örtliche Notrufnummer an. Jede Minute zählt!



# UNSER SERVICEVERSPRECHEN

## ✓ **Besondere Wertschätzung**

Das wertschätzende und persönliche Miteinander liegt uns am Herzen.

Wir beraten Sie individuell, persönlich und passend zu Ihrer Situation, Ihren Wünschen und den gesetzlichen Vorschriften. Zeit spielt für uns dabei keine Rolle, denn Ihre Zufriedenheit als Kunde hat für uns höchste Priorität.

## ✓ **Kompetente Beratung**

Auf Basis Ihrer Wünsche und aller relevanten Aspekte schlagen wir geeignete Lösungen vor.

Wir hören aufmerksam zu, schauen genau hin, denken mit und voraus, beraten verständlich und herstellerunabhängig.

## ✓ **Transparente Angebote**

Unsere Angebote sind nachvollziehbar, anschaulich und umfassend.

Wir dokumentieren Gerätespezifikationen und führen detailliert alle Kosten auf. Wir begleiten Sie persönlich, auf Wunsch auch vor Ort, bis Sie alle Informationen und die Gewissheit haben, die richtige Entscheidung zu treffen.

## ✓ **Fachkundige Unterweisung**

Die Inbetriebnahme und Unterweisung realisieren wir professionell und einfach verständlich.

Gerne geben wir unser umfangreiches Fachwissen an Sie weiter und bleiben dabei, dank regelmäßiger Schulungen unseres Teams, langjähriger Erfahrung und unserer Begeisterung für die Sache, immer up-to-date.

## ✓ **Kontinuierliche Betreuung**

Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da. Wir begleiten unsere Kunden nachhaltig, sowohl online per Geräte-Fernüberwachung als auch offline mit unserem Erinnerungsservice. Unser Team an erfahrenen Ansprechpartnern ist für jedes Anliegen und zu jeder Zeit für Sie da, direkt erreichbar und schnell vor Ort.

**Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand:  
Beratung, Vertrieb, Schulung und Betreuung.**

# LIFEPAK® CR2 DEFIBRILLATOR



Der CR2 ist der einzige AED, der Thoraxkompressionen während der EKG-Rhythmusanalyse zulässt und damit Pausen zwischen der HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und der Defibrillation reduziert. Das bedeutet eine signifikante Reduktion von Hirnschäden für den Überlebenden. Wenn ein defibrillierbarer Rhythmus erkannt wird, liefert der CR2 Schocks, ohne dass der Anwender eine eigene Entscheidung treffen muss. Mit dem vollständig automatisierten CR2 kann sich der Nothelfer auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Leben retten.

1-2

## Zweistufiges Design

Mit leicht verständlichen, großen Grafiken (im Display). Selbst völlig ungeschulte Anwender wissen eindeutig, was als Erstes zu tun ist.



## cprINSIGHT® -Analysetechnologie

Analysiert bereits während der Thoraxkompressionen, um einen defibrillierbaren Rhythmus festzustellen, eine Pause ist nicht notwendig.



## ClearVoice™ -Technologie

Erkennt Umgebungsgeräusche und passt die Lautstärke der Anweisungen entsprechend an.



## Kind-Modus-Taste

Schnelles und einfaches Umschalten zwischen Erwachsenen- und Kindermodus, je nach Alter des Patienten.



## LIFEPAK TOUGH™

IP55-Schutzart für anspruchsvolle Umgebungen.



## QUIK-STEP™ -Elektroden

Gerät öffnen, roten Handgriff ziehen und die Elektroden einzeln direkt vom Gerät abziehen, um sie einfach und schnell auf dem Patienten zu platzieren.



## Metronom und HLW-Coaching

Sorgt für eine effektive Geschwindigkeit und bietet akustische Unterstützung, damit Anwender die richtige Technik bestimmen und gegebenenfalls korrigieren können.



## Höchste verfügbare Energie

Je nach Bedarf, bis zu 360 J für effektivere Schocks möglich.



## Zweisprachig (optional)

Umschalten zwischen zwei voreingestellten Sprachen bei der Verwendung des Geräts.



## Garantie


Sie haben 8 Jahre Garantie auf den LIFEPAK® CR2.





## LIFEPAK® CR2 AED mit WLAN

WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral™ für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung, cprINSIGHT® Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus, ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen, cprCOACH® Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie auf das Gerät. Wahlweise als voll- oder halbautomatischer AED sowie mit Handgriff oder in Hard-Shell-Tasche.

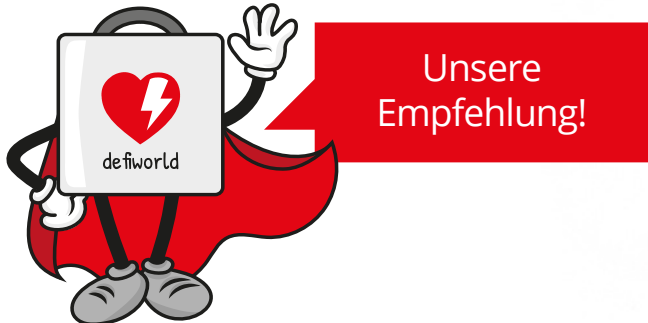

Art.-Nr.	Konnektivität	Ausführung	Ausstattung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/VE
99512-000095	WLAN	vollautomatisch	mit Handgriff	deutsch		1 Stück	1.995,00 €
99512-000099	WLAN	vollautomatisch	mit Handgriff	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.070,00 €
99512-000380	WLAN	halbautomatisch	mit Handgriff	deutsch		1 Stück	1.895,00 €
99512-000384	WLAN	halbautomatisch	mit Handgriff	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	1.970,00 €
99512-000094	WLAN	vollautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch		1 Stück	2.070,00 €
99512-000098	WLAN	vollautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.145,00 €
99512-000379	WLAN	halbautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch		1 Stück	1.970,00 €
99512-000383	WLAN	halbautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.045,00 €



## LIFEPAK® CR2 AED mit WLAN und Mobilfunk

Mit Simkarte zur mobilen Kommunikation, WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral™ für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung, cprINSIGHT® Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus, ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen, cprCOACH® Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie auf das Gerät. Wahlweise als voll- oder halbautomatischer AED sowie mit Handgriff oder in Hard-Shell-Tasche. Nur in Verbindung mit Datenplan für Sim LIFEPAK® CR2 (Mehr Infos auf der nachfolgenden Seite).

Art.-Nr.	Konnektivität	Ausführung	Ausstattung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/VE
99512-000390	Simkarte	vollautomatisch	mit Handgriff	deutsch		1 Stück	2.145,00 €
99512-000399	Simkarte	vollautomatisch	mit Handgriff	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.220,00 €
99512-000388	Simkarte	halbautomatisch	mit Handgriff	deutsch		1 Stück	2.045,00 €
99512-000397	Simkarte	halbautomatisch	mit Handgriff	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.120,00 €
99512-000389	Simkarte	vollautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch		1 Stück	2.220,00 €
99512-000398	Simkarte	vollautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.295,00 €
99512-000387	Simkarte	halbautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch		1 Stück	2.120,00 €
99512-000395	Simkarte	halbautomatisch	in Hard-Shell-T.	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2.195,00 €



# LIFELINKCENTRAL™ LIZENZ

## LIFELINKcentral™ Basic Lifetime-Lizenz

Basiszugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung. Dieser ist bereits im Lieferumfang des Gerätes enthalten.

### Der Basiszugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über Gerätestatus\*
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2\*

Best.-Nr.	Lizenz (pro CR2)	Laufzeit	Preis/VE
99428-000350	LIFELINKcentral™ Basic	-	kostenlos

## LIFELINKcentral™ Advantage Lizenz

Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung.

### Der erweiterte Zugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über Gerätestatus\*
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2\*
- ✓ Manuelle Verwaltung von Geräteinformationen und Prüfintervallen, auch bei nicht vernetzten Geräten
- ✓ Nachträgliches Herunterladen von Berichten (nach Real-Einsatz, kein Vor-Ort-Service)\*
- ✓ Bereitschaftskontrolle (kein Vor-Ort-Service)\*
- ✓ Free Supply Replenishment (nach Real-Einsatz)

Best.-Nr.	Lizenz (pro CR2)	Laufzeit	Preis/VE
99428-000378	LIFELINKcentral™ Advantage	1 Jahr	95,00 €
99428-000380	LIFELINKcentral™ Advantage	2 Jahre	171,00 €
99428-000382	LIFELINKcentral™ Advantage	4 Jahre	285,00 €

## LIFELINKcentral™ Advantage Platin Lizenz\*\*

Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung.



### Der erweiterte Zugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über Gerätestatus\*
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2\*
- ✓ Manuelle Verwaltung von Geräteinformationen und Prüfintervallen, auch bei nicht vernetzten Geräten
- ✓ Nachträgliches Herunterladen von Berichten (nach Real-Einsatz, kein Vor-Ort-Service)\*
- ✓ Bereitschaftskontrolle (kein Vor-Ort-Service)\*
- ✓ AED Einsatznachbetreuungspaket (nach Real-Einsatz, Vor-Ort-Service)
- ✓ Wechsel der Elektroden nach einem Realeinsatz und Herstellung der AED Gerätebereitschaft (verbrauchtes und defektes Zubehör wird nach Aufwand berechnet)
- ✓ Kostenlose Software-Updates\*

Die Advantage Platin-Lizenz\*\* ist auf 4 Jahre begrenzt und verlängert sich nicht automatisch. Nur wenn Sie es wünschen und bei uns das Verbrauchsmaterial (Quik-Step-Elektroden und Batterie) erwerben, verlängert sich die Lizenz kostenfrei um weitere 4 Jahre.

\*Bei drahtlos verbundenem AED

\*\*Sollten Sie das Verbrauchsmaterial nicht bei uns erwerben, wird Ihre Advantage Platin Lizenz nach Ablauf der 4 Jahre, auf die kostenlose Basic Lifetime-Lizenz reduziert.

Best.-Nr.	Lizenz	Laufzeit	Preis/VE
99428-000383	LIFELINKcentral™ Platin	4 Jahre	395,00 €



## Datenplan für LIFEPAK® CR2 Mobilfunk

Optionspflicht bei Mobilfunk-Variante. Enthält die Mobilfunkgebühren für 4/8 Jahre zur Übertragung von Daten des LIFEPAK® CR2 an LIFELINKcentral™ und LIFENET.

Best.-Nr.	Laufzeit	Preis/VE
50998-000025	4 Jahre	340,00 €
50998-000026	8 Jahre	575,00 €



**LIFEPAK® CR2 Hard-Shell Tragetasche**  
Robuste Tasche zur Aufbewahrung des LIFEPAK® CR2. Bietet auf der Rückseite Platz für QUIK-STEP Ersatz-Elektroden.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
11260-000047	LIFEPAK® CR2 Hard-Shell Tragetasche	1 Stück	76,50 €



**LIFEPAK® CR2 QUIK-STEP Elektroden**  
Für Stimulation/Defibrillation/EKG, Lagerfähigkeit 4 Jahre.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
11101-000021	LIFEPAK® CR2 QUIK-STEP Elektroden	1 Stück	102,00 €

**LIFEPAK® CR2 Wandhalterung**  
Universal Wandhalterung in zwei Ausführungen.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
11210-000046	LIFEPAK® CR2 Wandhalterung	weiß	1 Stück	46,00 €
11210-000047	LIFEPAK® CR2 Wandhalterung	grün	1 Stück	46,00 €



Unsere Empfehlung!

**LIFEPAK® CR2 Ambu® Res-Cue Mask**  
Ersthelfersset beinhaltet:  
 ✓ 2 Paar Einweg-Handschuhe  
 ✓ 1 wiederverwendbare Atemmaske  
 ✓ 1 Einweg-Rasierer ✓ 1 Kleiderschere  
 ✓ 1 Einweg-Reinigungstuch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
11998-000321	LIFEPAK® CR2 Ambu® Res-Cue Mask	1 Set	37,80 €



**LIFEPAK® CR2 Batterie**  
Lithium-Mangandioxid (Li/MnO<sub>2</sub>), 12,0 V, 4,7 Ah, 55,8 Wh. Bereitschaftszeit 4 Jahre, wenn im ungebrauchten Gerät installiert.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
11141-000165	LIFEPAK® CR2 Batterie	1 Stück	229,50 €



**Wandschild mit Halterung**  
Die Wandhalterung besteht aus einem Wandschild und einer Halterung für Ihren AED. Die bebilderte Anleitung „Rettungsmaßnahmen bei plötzlichem Herzstillstand“ unterstützt den Helfer und erinnert, auch unter Stress, an die lebensrettenden Maßnahmen. Maße: 24 cm x 59 cm (B x H).

- ✓ Bebilderte Anleitung für Ersthelfer: „Rettungsmaßnahmen bei plötzlichem Herzstillstand“
- ✓ Geeignet für Lifepak CR2 mit oder ohne Tasche

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	VE	Preis/VE
CR2-WP-HG	Wandschild mit Halterung	Lifepak CR2 ohne Tasche	1 St.	57,00 €
CR2-WP-TT	Wandschild mit Halterung	Lifepak CR2 mit Tasche	1 St.	59,00 €







# HEARTSINE SAMARITAN® 350P/360P/500P

Die HeartSine AED-Geräte sind kinderleicht zu bedienen und führen garantiert eine sichere sowie rasche Analyse durch und geben bei Bedarf einen Schock ab.

Mit der derzeit höchsten IP Rate (=Rating für Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz) IP56 eignen sich die HeartSine-Geräte bestens für Outdoor-Einsätze und in Bereichen, die besonderen Bedingungen und hohen Anforderungen ausgesetzt sind – wie es etwa in der Schifffahrt, an Küsten, in Feuchtgebieten, im Militär- und Rettungsdienst oder bei der Polizei der Fall ist.

Kostenfreie Software Updates können mit Hilfe des optionalen Datenkabels durchgeführt werden. Nach einem Realeinsatz und der Datenübermittlung an den Hersteller kann ein kostenloser Ersatz der Pad-Pak Kassette in Verbindung mit dem Forward Hearts Programm\* (Free Pad-Pak) erfolgen.

Einfach verständliche, optische und akustische Anweisungen



Das HeartSine Gateway (Wi-Fi Überwachungsmodul), das über WLAN mit dem LIFELINKcentral AED Programm Manager kommuniziert kann Ihren HeartSine AED 24 Stunden, 7 Tage die Woche selbstständig überwachen, sowohl an einem als auch an mehreren Standorten.

*\*Mehr zum Forward Hearts Programm auf den folgenden Seiten.*



Hier finden Sie das **Technische Datenblatt** der HeartSine Range:  
[www.defiworld.de/service-download](http://www.defiworld.de/service-download)





## HeartSine SAM 500P AED / Connected

Halbautomatischer Defibrillator, manuelle Schockauslösung, 8 Jahre Garantie, inkl. Multifunktions-Doppeltragetasche. Der weltweit einzige AED, der die Qualität der Herzdruckmassage ohne ein zusätzliches Feedbackgerät kontrolliert und bei Bedarf den Retter anweist: „schneller, langsamer, fester drücken!“ Diese einzigartige Zusatzfunktion garantiert Laien-Erst Helfern wie auch professionellen Rettern eine effiziente und optimale Herzdruckmassage.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
500-STR-DE-10	SAM 500P AED	1 Stück	1.529,00 €
500-STR-DE-GW	SAM 500P AED Connected	1 Stück	1.784,00 €



## HeartSine SAM 350P AED / Connected

Halbautomatischer Defibrillator, manuelle Schockauslösung, 8 Jahre Garantie, inkl. Multifunktions-Doppeltragetasche.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
350-STR-DE-10	SAM 350P AED	1 Stück	1.223,00 €
350-STR-DE-GW	SAM 350P AED Connected	1 Stück	1.529,00 €



## HeartSine SAM 360P AED / Connected

Vollautomatischer Defibrillator, automatische Schockauslösung, 8 Jahre Garantie, inkl. Multifunktions-Doppeltragetasche.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
360-STR-DE-10	SAM 360P AED	1 Stück	1.223,00 €
360-STR-DE-GW	SAM 360P AED Connected	1 Stück	1.529,00 €



## Pad-Pak/Ped-Pak Batterie-/Elektrodenkassette

Langzeit-Lithium-Ionen-Batterie und Elektroden mit einer Haltbarkeit von 4 Jahren.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
PAD-PAK-03	PAD-PAK für Erwachsene/Kinder > 8 Jahren > 25 kg	1 St.	144,00 €
PAD-PAK-04	PED-PAK für Kleinkinder < 8 Jahren u. < 25 kg	1 St.	165,00 €
PAD-PAK-07	PAD-PAK für Erwachsene/Kinder ETSO*	1 St.	155,00 €

\*Luftdichtheitspezifikation gemäß Europäische Technische Standardzulassung (European Technical Standard Order)

## HeartSine Gateway (WiFi Überwachungsmodul)

- ✓ Selbstüberwachung u. Datenübertragung via Wi-Fi an LIFELINKcentral™ AED Programm Manager
- ✓ Kompatibel mit allen HeartSine Samaritan PAD-Modellen, die in oder nach 2013 hergestellt wurden\*\*
- ✓ Inkl. Gateway Schutz- und Tragetasche, Batterien und Bedienungsanleitung
- ✓ 2 Jahre Herstellergarantie

\*\*Seriennummer beginnt mit 13 oder höher

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
ACC-GTW-DE-01	HeartSine Gateway	1 Stück	349,00 €





# FORWARD HEARTS



**Wurde Ihr Leben mit Hilfe eines AED\* gerettet?  
Dann können Sie durch unsere Spende selbst zum Retter werden.**

Forward Hearts gibt Überlebenden eines plötzlichen Herzstillstands, bei deren Rettung ein Defibrillator\* verwendet wurde, die Möglichkeit, einer Hilfsorganisation oder gemeinnützigen Einrichtung ihrer Wahl einen AED zu spenden, um somit möglicherweise ein anderes Leben zu retten.



Wir setzen uns dafür ein, Leben zu retten und öffentlich zugängliche automatische externe Defibrillatoren (AED) leichter verfügbar zu machen. Die Spende eines Defibrillators durch das **Forward Hearts Programm** macht diese lebensrettende Technologie noch mehr Menschen zugänglich und bietet vielen bei einem plötzlichen Herzstillstand eine bessere Überlebenschance.

\*LIFEPAK® CR2 AED, LIFEPAK CR® Plus o. HeartSine SAM 500P/350P/360P AED

## **So funktioniert das Programm:**

Wurde ein AED\* zur Rettung eines Lebens verwendet, übernehmen wir es vor Ort alle Beteiligten miteinander zu vernetzen, um das Spendenprogramm in Gang zu setzen. Der/Die Überlebende kann seine/ihre Spende anonym und vertraulich oder im Rahmen einer öffentlichen Bekanntmachung einer Hilfsorganisation/Institution zukommen lassen. Wir koordinieren die Spende und die Übergabe an die Hilfsorganisation vor Ort. Um das lebensrettende Ereignis zu würdigen, wird die Spende im Namen des Überlebenden, des AED Herstellers und in unserem Namen vorgenommen.

Wenn Sie eine Forward Hearts-Geschichte zu erzählen haben oder jemanden kennen, der einen plötzlichen Herzstillstand mit Hilfe eines AED\* überlebt hat, teilen Sie uns Ihre Geschichte bitte durch Ausfüllen des FH-Formulars mit.

**Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne das Forward Hearts-Formular (FH) per Mail zu.**

## **Erzählen Sie uns die Geschichte Ihres plötzlichen Herzstillstands**

In Ihrem Namen kann einer Organisation Ihrer Wahl ein AED gespendet werden, dafür müssen Sie uns nur Ihre eigene Geschichte erzählen. Sobald Sie unser Forward Hearts-Formular ausgefüllt haben, wird sich ein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Details für die AED-Spende an die Organisation/Hilfsorganisation Ihrer Wahl zu besprechen.

Senden Sie uns eine Mail an: [info@defiworld.de](mailto:info@defiworld.de)



# POWERHEART® G5 AED

## Rescue Ready® Technologie

- ✓ Vorkonnetzte Defibrillations-Elektroden
- ✓ Täglicher, automatischer Selbsttest von Batterie, Gerät, Software und Elektroden (Vorhandensein und Funktionalität)
- ✓ Automatischer wöchentlicher Energietest (Teilaufladung)
- ✓ Automatischer monatlicher Energietest (Vollaufladung)
- ✓ Status-Anzeige über den Bereitschaftszustand des Powerheart® AED (Rescue Ready®)
- ✓ Batterie-Status-Anzeige
- ✓ FDA geprüfte Sicherheit
- ✓ Keine Ersatzbatterie notwendig

## Weitere Leistungsmerkmale

- ✓ Der fortschrittliche Algorithmus erlaubt, die Elektroden an Patienten anzulegen, die bei Bewusstsein sind und sich bewegen (RHYTHMx®-Technologie)
- ✓ Gibt angepasste, eskalierende, für den Patienten individuell notwendige Energie ab (95 – 354 Joule)
- ✓ Gibt, wenn notwendig, synchronisierten Schock bei ventrikulären Tachykardien ab
- ✓ Sofortiger Schock-Widerruf, wenn Patient unvermittelt in nicht-schockbaren Rhythmus wechselt
- ✓ Programmierbare Benutzerumgebung
- ✓ Höchste Sensitivität, nicht-schockbarer Rhythmus – NSR (>99 %) für Spezifität, nicht-schockbar – Asystolie (>95 %) für Spezifität
- ✓ Schockabgabe für ventrikuläre Fibrillation (VF) und ventrikuläre Tachykardie (VT)
- ✓ Folgt den Richtlinien der American Heart Association (AHA) und des European Resuscitation Council (ERC)
- ✓ AED: 8 Jahre Garantie, Intellisense®-Lithiumbatterien: 4 Jahre Vollaustauschgarantie

## Benutzerfreundlichkeit

- ✓ Einknopf-Bedienung oder vollautomatische Benutzerführung
- ✓ Kürzeste Schritte zur Defibrillation: Elektroden anlegen, Schockabgabe
- ✓ Nicht polarisierte Elektroden (identisch)
- ✓ Textbildschirm für lautes Umfeld und Hörgeschädigte
- ✓ Rescue Coach™ führt den Retter mit ausführlichen Sprachanweisungen durch die Rettungskette, inkl. HLW
- ✓ Zweisprachig



Mit iCPR-Elektroden erhältlich



## Powerheart® G5 AED

Der Powerheart® G5 AED bietet eine leistungsstarke Kombination von Funktionen, die Laien und Profis helfen, Patienten mit plötzlichem Herzstillstand schnell und effektiv zu behandeln und deren Leben zu retten. Als erster AED verbindet er die vollautomatische Schockabgabe mit der Bedienung in zwei Sprachen, variabel eskalierender Energieabgabe und schnellen Schockzeiten. Auf das Tempo des Benutzers abgestimmte Anweisungen und ein optionales HLW-Feedback-Gerät ermöglichen die Reanimation Schritt für Schritt, auch für ungeübte Anwender. Die nicht polarisierten Elektroden können auf jeder Seite der Brust des Patienten positioniert werden und der Powerheart® G5 gibt in der vollautomatischen Version einen notwendigen Schock ab, ohne dass der Ersthelfer eingreifen muss. Nach der Reanimation können Ereignisdaten direkt und einfach über einen USB-Anschluss abgerufen werden.

### Das Gerät ist Rescue Ready®

Dies bedeutet, es führt täglich Selbsttests von Batterie, Hardware, Software und Defibrillationselektroden (Funktion und Vorhandensein) durch, um sicher zu stellen, dass sie im Ernstfall funktionieren.



Das Gerät ist nicht einsatzbereit



Das Gerät ist einsatzbereit



Halbautomatische Version



Vollautomatische Version

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
G5A-08 C	Powerheart® G5 AED Automatik mit HLW-Gerät	1 Stück	1.840,00 €
G5A-08 A	Powerheart® G5 AED Automatik ohne HLW-Gerät	1 Stück	1.740,00 €
G5S-08 C	Powerheart® G5 AED Semiautomatik mit HLW-Gerät	1 Stück	1.790,00 €
G5S-08 A	Powerheart® G5 AED Semiautomatik ohne HLW-Gerät	1 Stück	1.690,00 €







### Powerheart® G5 Wandschale „Silver“

Passend für Powerheart® G3 und Powerheart® G5 (in Semi-Rigid Carry Case). Mit Aufschrift „AED“.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
180-2022-001	Powerheart® G5 Wandschale „Silver“	1 Stück	65,00 €



### Powerheart® G5 Intellisense®-Lithiumbatterie

Kann bis zu 500 Schocks (mit 150 VE) abgeben, mit niedrigem Batteriestand noch mind. neun Schocks.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
XBTAED001A	Powerheart® G5 Intellisense®-Lithiumbatterie	1 Stück	395,00 €



### Powerheart® G5 Semi Rigid Transporttasche

Die feste Gerätetasche mit verstellbarem Tragegurt bietet zusätzlichen Schutz für den Powerheart® G5. Zusätzliche Elektroden und weiteres, notwendiges Zubehör finden in der Tasche auf der Rückseite ihren Platz. Die Tasche ist so konzipiert, dass die Rescue Ready® Anzeige und das Verfallsdatum der Elektroden immer deutlich sichtbar sind.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
XCAAED004A	Powerheart® G5 Semi Rigid Transporttasche*	1 Stück	110,00 €




### Powerheart® G5 Defibrillationselektroden

In 3 Varianten erhältlich:

- ✓ Defibrillationselektroden (Erwachsene)
- ✓ Defibrillationselektroden (Erwachsene) mit HLW-Feedback Sensor
- ✓ Defibrillationselektroden (Kinder)

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
XELAED001B	Defibrillationselektroden (Erw.)	1 St.	69,00 €
XELAED002B	Defibrillationselekt. (Erw.) HLW-Feedback-Sensor	1 St.	150,00 €
XELAED003B	Defibrillationselektroden (Kinder)	1 St.	85,00 €

Die **Rettenkette** veranschaulicht, welche Stationen ein Notfallpatient von der Alarmierung des Rettungsdienstes bis zum Eintreffen in der Notaufnahme des Krankenhauses durchläuft.

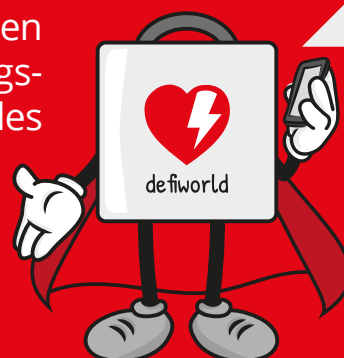

Notruf  
**112**

\*Trotz desselben Grundprinzips kann sich die Darstellung der Rettenkette je nach Quelle deutlich unterscheiden.

# POWERHEART® G3 ELITE

Die neue G3-Generation.  
Erschwinglich. Effektiv. Zuverlässig.



Der neue Powerheart G3 Elite nutzt die bewährte Rescue Ready®-Technologie zur Durchführung täglicher Selbsttests, um sicherzustellen, dass die Elektroden und die Batterie sowohl angeschlossen als auch funktionsbereit sind, damit der G3 Elite 365 Tage im Jahr einsatzbereit ist. Dank des modernen Schaltkreises werden Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit des AED gesteigert.

Ersthelfer können, unabhängig von ihrem Kenntnisstand, schnell und intuitiv auf einen plötzlichen Herztod (PHT) reagieren. Der RescueCoach™ führt die Anwender Schritt für Schritt mit Sprach- und Textaufforderungen durch den gesamten Einsatz. Vollständig automatische Schockabgabe und vorkonnectierte Elektroden, um Ersthelfern beim Einsatz das nötige Selbstvertrauen zu geben, sind weitere Vorteile dieses AED.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
9790A-1008	Powerheart® AED G3 ELITE Fully-Automatic	1 Stück	1.199,00 €
9790E-1008	Powerheart® AED G3 ELITE Semi-Automatic	1 Stück	1.199,00 €

Der neue Powerheart G3 Elite ist voraussichtlich ab Winter 2019/2020 bei uns erhältlich!

- ✓ RescueCoach
- ✓ HLW-Taktgeber
- ✓ Helle Textanzeige mit Rückbeleuchtung
- ✓ Nicht polarisierte Defibrillationselektroden, die rasch auf beiden Seiten des Brustbereichs des Patienten angebracht werden können
- ✓ Abgestimmte Patiententherapie
- ✓ 7 Jahre Garantie

Hier finden Sie die **Produktbroschüre** des Powerheart® G3 Elite:  
[www.defiworld.de/service-download](http://www.defiworld.de/service-download)





# ZOLL AED 3 DEFIBRILLATOR



Bei einem plötzlichen Herzstillstand hat das Opfer die besten Überlebenschancen, wenn umgehend mit der Wiederbelebung begonnen wird und ein Helfer einen automatisierten externen Defibrillator (AED) einsetzt. Der ZOLL AED 3<sup>®</sup> Defibrillator bereitet den Weg mit der Real CPR Help<sup>®</sup> Technologie, um die Helfer bei der Durchführung qualitativ hochwertiger Wiederbelebung anzuleiten.

- ✓ Verbessertes Real CPR Help mit Farbdisplay mit lebensechten Einsatzbildern, CPR-Zyklus-Timer und großer, farbcodierter Balkenanzeige, die die Tiefe der Kompressionen anzeigt.
- ✓ Die RapidShock<sup>™</sup> Analyse bietet branchenweit die kürzeste Herzrhythmus-Analysezeit und damit eine durchgängigere lebensrettende Wiederbelebung.
- ✓ Die Elektroden (CPR Uni-padz<sup>™</sup>) können sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern verwendet werden, es besteht daher kein Bedarf an zwei unterschiedlichen Elektroden-Sets.
- ✓ Cloud-Anbindung für die automatische Übertragung der AED-Bereitschaft.
- ✓ Daten Übertragung: Alle Zoll Produkte sind dafür ausgerüstet CPR-Daten zu übertragen und bieten die Möglichkeit den Reanimationsvorgang vollständig zu analysieren.
- ✓ Die Haltbarkeit von 5 Jahren für Elektroden und Batterien steigert die Betriebsbereitschaft und reduziert die Wartungshäufigkeit.
- ✓ Erhältlich als halbautomatische und vollautomatische Version.

Real CPR Help gibt dem Ersthelfer in Echtzeit Rückmeldung über Frequenz und Tiefe der Kompressionen, sodass die Chancen des Patienten zur Rückkehr eines Spontankreislaufes optimiert werden.



- ✓ Kompressionstiefen-Indikator für die dauerhaft richtige Tiefe der Herzdruckmassage
- ✓ Kompressionsfrequenz-Indikator für den korrekten Rhythmus der Herzdruckmassage
- ✓ Pausenzeit-Indikator für die Zeitmessung der CPR Unterbrechungen
- ✓ Sprachansagen und visuelle Anzeigen für optimale CPR Kompressionen. Feedback, wie „fester Drücken“, helfen dabei, rasch die benötigte Kompressionsqualität zu erreichen, die in eine bestärkenden Meldung „Herzdruckmassage gut“ resultiert. Um Unterbrechungen zu minimieren, erfolgt „CPR fortsetzen“ als weitere wichtige Erinnerung.





### Zoll AED 3 Defibrillator

Der Zoll AED 3 Defibrillator ist mit einem LCD Touchscreen, frei konfigurierbaren Laienhelferanfragen, Erwachsenen- und Kindermodus sowie Fernüberwachung mit dem PlusTrac™ AED Program Management System ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem die CPR Unipadz Elektrode, eine AED 3 Lithium Batterie und die Zoll AED 3 Tasche. Eine PlusTrac 1-Jahreslizenz ist ebenfalls kostenlos enthalten. Wahlweise gibt es den Zoll AED 3 Defibrillator als voll- oder halbautomatischen AED. Maße: 24,7 x 23,6 x 12,7 cm (T x B x H), Gewicht: 2,5 kg, Schutzklasse IP55.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
8501-001202-08	Zoll AED 3 Defibrillator vollautomatisch	1 Stück	2.245,00 €
8501-001201-08	Zoll AED 3 Defibrillator halbautomatisch	1 Stück	2.145,00 €

### PlusTrac 1 - AED Programm Management

Interaktives online AED Management mit Erinnerungs- und Benachrichtigungsfunktion.


Führen Sie eine lückenlose Verwaltung und Verfolgung des ZOLL AED 3 mit Program Management Onboard™ durch. Stellen Sie bei der Installation Ihres ZOLL AED 3 innerhalb weniger Minuten die Cloud-Verbindung mit PlusTrac™ her, dem Online-AED Programmverwaltungssystem von ZOLL.

Program Management Onboard wird nach Abschluss jeder automatischen Selbstprüfung regelmäßig den Status Ihres ZOLL AED 3 melden. Wenn bei der Selbstprüfung ein Fehler festgestellt wird, sendet Ihnen PlusTrac sofort die Details per E-Mail.

Sie können sich zudem jederzeit bei Ihrem PlusTrac-Konto anmelden, um alle AED in Ihrem Verantwortungsbereich nach von Ihnen verwalteten Standorten gruppiert zu überprüfen und den Schulungsstatus Ihrer betrieblichen Ersthelfer anzuzeigen.

PlusTrac sorgt für eine nahtlose und einfache AED-Programmverwaltung und Program Management Onboard ermöglicht die Selbstverwaltung Ihres ZOLL AED 3.

Im Lieferumfang des Zoll AED 3 Defibrillators ist eine PlusTrac 1-Jahreslizenz (Sprache: deutsch) kostenlos inklusive.

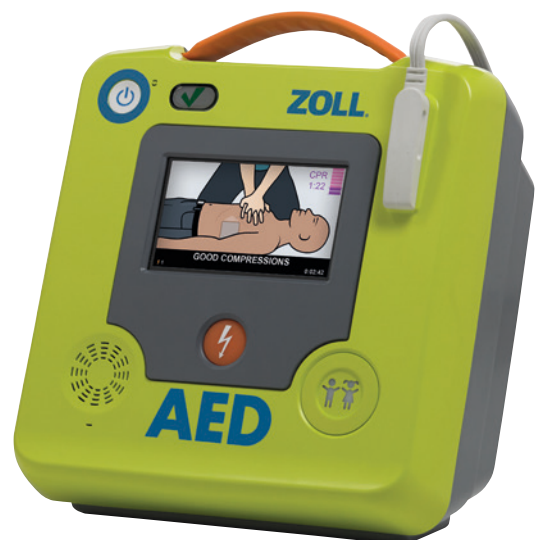



## Zoll AED 3 Wandhalterung

Hochwertige Wandhalterung aus Kunststoff. Die Universal-Wandhalterung bietet Platz für den ZOLL AED 3 mit oder ohne Zoll AED 3 Tasche und ist mit dem grünen ILCOR AED-Symbol versehen. Inklusive Befestigungsmaterial, einer Karte für die Kontrolle von Verbrauchsartikeln, einer Wandhalterungsvorlage sowie einer Installationsanleitung.

### In zwei Versionen erhältlich:

- ✓ Zoll AED Wandhalterung für AED ohne Tasche
- ✓ Zoll AED Wandhalterung für AED mit Tasche

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
8000-001255	Wandhalterung für Zoll AED 3 ohne Tasche	1 Stück	48,00 €
8000-001266	Wandhalterung für Zoll AED 3 mit Tasche	1 Stück	52,50 €



## CPR Uni-padz™ Universal Elektrode

Universelle Elektroden für Kinder und Erwachsene verwendbar. Vollständiges HLW-Feedback. 5 Jahre Lebensdauer. Inkl. Rettungskit mit Schere, 1 Paar Handschuhe (latexfrei), Atemmaske, Papiertuch, Rasierer und Reinigungstuch.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
8900-000260	CPR Uni-padz™ Universal Elektroden	1 Paar	153,00 €



## Zoll AED 3 Lithium Batterie

Im Standby-Modus hat die Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie des ZOLL AED 3 eine Lebensdauer von 5 Jahren. Wenn der ZOLL AED 3 nicht für eine Wiederbelebung eingesetzt wird, ersetzen Sie diese nur einmal alle 5 Jahre.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
8000-000696	Zoll AED 3 Lithium Batterie	1 Stück	140,00 €



## Zoll AED 3 Tasche

Die robuste Tragetasche schützt den Zoll AED 3 unterwegs. Im geöffneten Zustand (Klappe mit Magnetverschluss) kann der AED auch in der Tragetasche benutzt werden. Sie bietet zusätzlichen Platz für einen Reservesatz CPR Uni-padz und verfügt über einen verstellbaren Trageriemen.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/VE
8000-001250	Zoll AED 3 Tasche	1 Stück	105,00 €



# ROTAID AED WANDSCHRANK

**Mit Rotaid AED Schränken schaffen Sie einen herzsicheren Hafen für Ihre Kunden, Gäste und Mitarbeiter.**

Genau wie der Rettungsring, der sich in jedem Hafen, in der Schifffahrt oder an Gewässern befindet, wird Rotaid zum globalen Symbol für einen lebensrettenden Defibrillator. Das Design der Rotaid Schränke zeichnet sich durch 3 wesentliche Merkmale aus:



### Schnelles Handling

Bei einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede Sekunde. Durch das runde Design fallen die Rotaid Schränke auf und sind so leichter auffindbar. Außerdem sparen Sie wertvolle Zeit in der Handhabung, nur eine Drehung genügt und der Schrank ist offen.



### Einfache Bedienung

Jeder sollte im Notfall fähig sein zu helfen. Das intuitive, einfache Design der Rotaid Schränke ist für jeden sofort verständlich, sogar für unerfahrene Helfer.



### Nachhaltigkeit

Modernste Technologie kombiniert mit langlebigen, recycelten Materialien machen die Rotaid Schränke zu ökologisch wertvollen Produkten. Der modulare Aufbau macht die Schränke variabel, nachrüstbar, energieeffizient und besonders ökonomisch.

**NEU**  
mit verbessertem  
IR-Schutz

### Rotaid AED Wandschrank IR

Hochwertiger AED Wandschrank. Die Haube besteht aus 100% recyceltem Polycarbonat. Die Rückwand besteht aus 100% recyceltem HDPE (Hart-Polyethylen).

Im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Mit dunkelgrünem Cover für stärkeren IR-Schutz, akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest (Schutzklasse IK10), wasserabweisend (IP56\*). Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**Bei uns erhältlich als Rotaid Solid Plus Heat AED Wandschrank.**

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
11996-000453	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Grün IR	1 St.	498,00 €



Weitere **Schränke** und **Wandhalterungen** finden Sie in unserem Onlineshop unter:  
[www.defiworld.de/schraenke-wandhalterungen/](http://www.defiworld.de/schraenke-wandhalterungen/)





### Rotaid AED Wandschrank

Hochwertiger AED Wandschrank. Die Haube besteht aus 100% recyceltem Polycarbonat. Die Rückwand besteht, je nach Typ, aus 100% recyceltem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder aus 100% recyceltem HDPE (Hart-Polyethylen). Im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Mit akustischem Alarm (84 bis 98 db), extrem stoßfest (höchste Schutzklasse IK10), wasserabweisend, IR-Schutz. Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Farben: Grün (Full), Rot (Full), Gelb (Full), Weiß, Rot, Gelb und Grün

### Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen

- ✓ Rotaid Plus AED Wandschrank:  
Durchmesser ca. 47 cm, Tiefe ca. 18 cm,  
Gewicht ca. 1,7 kg
- ✓ Rotaid Solid Plus AED Wandschrank IP56:  
mit Schutzklasse IP56\*, Durchmesser  
ca. 48 cm, Tiefe ca. 18 cm, Gewicht ca. 6,7 kg
- ✓ Rotaid Solid Plus Heat AED Wandschrank:  
mit Schutzklasse IP56\*, für den Innen- und  
Außenbereich geeignet (ausgestattet mit  
Heizvorrichtung\*\* und inkl. 24 V Netzteil),  
Durchmesser ca. 48 cm, Tiefe ca. 18 cm,  
Gewicht ca. 6,9 kg

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
11996-000403	Rotaid Plus AED Wandschrank	Grün Full	1 St.	234,00 €
11996-000406	Rotaid Plus AED Wandschrank	Rot Full	1 St.	234,00 €
11996-000409	Rotaid Plus AED Wandschrank	Gelb Full	1 St.	234,00 €
11996-000441	Rotaid Plus AED Wandschrank	Weiß	1 St.	296,00 €
11996-000442	Rotaid Plus AED Wandschrank	Grün	1 St.	296,00 €
11996-000443	Rotaid Plus AED Wandschrank	Rot	1 St.	296,00 €
11996-000444	Rotaid Plus AED Wandschrank	Gelb	1 St.	296,00 €

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
11996-000404	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank	Grün Full	1 St.	332,00 €
11996-000407	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank	Rot Full	1 St.	332,00 €
11996-000410	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank	Gelb Full	1 St.	332,00 €
11996-000445	Rotaid Solid Plus AED Wands. IP56	Weiß	1 St.	380,00 €
11996-000446	Rotaid Solid Plus AED Wands. IP56	Grün	1 St.	380,00 €
11996-000447	Rotaid Solid Plus AED Wands. IP56	Rot	1 St.	380,00 €
11996-000448	Rotaid Solid Plus AED Wands. IP56	Gelb	1 St.	380,00 €

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
11996-000405	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Grün Full	1 St.	498,00 €
11996-000408	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Rot Full	1 St.	498,00 €
11996-000411	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Gelb Full	1 St.	498,00 €
11996-000449	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Weiß	1 St.	581,00 €
11996-000450	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Grün	1 St.	581,00 €
11996-000451	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Rot	1 St.	581,00 €
11996-000452	Rotaid Solid Plus Heat AED Wands.	Gelb	1 St.	581,00 €

\*Schutzklasse IP56: Schutz gegen Staubablagerungen in schädigender Menge und gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel.

\*\*Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5 °C, auch wenn die Außentemperatur auf -20 °C sinkt. Inkl. 24 V Netzteil (Bitte beachten Sie, dass ein 230 V Anschluss benötigt wird).



# WAHRNEHMUNG IHRES AED



Die Wahrnehmung eines AED ist von besonderer Bedeutung, denn im Notfall zählt jede Sekunde und der lebensrettende Defibrillator muss schnellstmöglich gefunden werden. Für eine bessere Wahrnehmung Ihres AED bieten wir Ihnen zum Beispiel die folgenden Möglichkeiten.



## Standsäule für Rotaid Schränke

Das Rotaid-Totem eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Durch den modularen Aufbau kann es jederzeit und überall einfach auf- und abgebaut werden. Damit eignet es sich auch perfekt für spezielle Events, wie z.B. Messen oder Partys. Auch für anspruchsvollere Umgebungen ist das Rotaid-Totem, dank der soliden Stahlkonstruktion, bestens geeignet. Ihr AED ist jederzeit sicher und gut sichtbar aufbewahrt.

Damit die Standsäule perfekt zu Ihrem Unternehmen passt, kann das doppelt pulverbeschichtete Gestell in jeder beliebigen RAL-Farbe hergestellt werden. Auf der Vorder-, Rück- und Oberseite des Rotaid-Totems können Paneele mit Informationen, Kundenlogo oder Werbung angebracht werden. Alle Paneele werden individuell nach Ihren Wünschen angefertigt.

Maße: 70 cm x 161,5 cm (B x H), Gewicht: 40 kg.

- ✓ Custom made Design
- ✓ Vollfarbiger UV-geschützter Druck
- ✓ Feste Bodenmontage möglich
- ✓ Geeignet für alle Rotaid-Schränke

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
11996-000900	Totem mit Fuß	nach Wahl	1 St.	699,00 €
11996-000901	Totem mit Fuß und Sonnenschutz	nach Wahl	1 St.	849,00 €

## AED Wahrnehmungspaket

Mit unserem AED Wandschild PREMIUM fällt Ihr AED-Wandschrank sofort auf. Die stabile Alu-Dibond-Platte im Format 65 x 100 cm (Bsp. Abb.) oder 57 x 100 cm (abhängig von dem verwendeten Wandschrank\*) wird farblich passend zu Ihrem Unternehmen gestaltet.

### Zusätzlich zum Wandschild enthält das AED Wahrnehmungspaket:

- ✓ 1 x AED Nasenschild, langnachleuchtend
- ✓ 2 x AED Hinweisschild, selbstklebend und langnachleuchtend
- ✓ 1 x Halterung fürfaltblätter:  
Leitfaden für den Herznotfall
- ✓ 40 x faltblatt Leitfaden für den Herznotfall
- ✓ 1 x A3 Poster: Rettungsmaßnahmen bei plötzlichem Herzstillstand
- ✓ 1 x A3 Poster: AED Standort
- ✓ 4 x A4 Poster: AED Standort

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
9990-015	AED Wahrnehmungspaket PREMIUM	inkl. Wandschild	1 St.	238,00 €
9990-011	AED Wahrnehmungspaket BASIC	ohne Wandschild	1 St.	73,00 €



## Rotaid AED Wahrnehmungspaket

Unser AED Rotaid Wandschild unterstützt die intuitive Handhabung des Rotaidsschrank und ist ein echter Eyecatcher. Die stabile Alu-Dibond-Platte im Format 57 x 100 cm wird farblich passend zu Ihrem Unternehmen gestaltet.

### Zusätzlich zum Wandschild enthält das AED Wahrnehmungspaket:

- ✓ 1 x AED Nasenschild, langnachleuchtend
- ✓ 2 x AED Hinweisschild, selbstklebend und langnachleuchtend
- ✓ 1 x Halterung fürfaltblätter:  
Leitfaden für den Herznotfall
- ✓ 40 x faltblatt Leitfaden für den Herznotfall
- ✓ 1 x A3 Poster: Rettungsmaßnahmen bei plötzlichem Herzstillstand
- ✓ 1 x A3 Poster: AED Standort
- ✓ 4 x A4 Poster: AED Standort

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VE	Preis/VE
9990-101	AED Wahrnehmungspaket ROTAIID-CR2	inkl. Wandschild	1 St.	238,00 €
9990-100	AED Wahrnehmungspaket BASIC-CR2	ohne Wandschild	1 St.	73,00 €

\*AED und Wandschrank müssen separat mit dazu bestellt werden!

Weitere Wahrnehmungsmöglichkeiten finden Sie in unserem Onlineshop unter:  
[www.defiworlD.de//sonstiges-zubehoer/](http://www.defiworlD.de//sonstiges-zubehoer/)







# AED EINWEISUNG NACH MPBetreibV

In Deutschland gilt für den Besitz von Defibrillatoren die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (kurz MPBetreibV). Für Medizinprodukte\*, wie einen neuen AED, schreibt die MPBetreibV eine Einweisungspflicht für die vom Betreiber beauftragte Person vor. Aber nicht nur laut Gesetz ist diese Einweisung (lebens-)wichtig. Im Fall der Fälle sollten Sie und Ihre Mitarbeiter wissen was zu tun ist. Daher bieten wir Ihnen folgende Schulungspakete an:

## ⚙️ **Basic Paket** - AED Inbetriebnahme und Einweisung:

Einweisung der beauftragten Person nach MPBetreibV in die technischen Spezifikationen des AED. Funktionskontrolle und Inbetriebnahme des AED sowie Erstellung eines Medizinproduktebuches inkl. Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll gemäß §10 MPBetreibV. Keine Schulung im Umgang mit einem Defibrillator.

## 👥 **Premium Paket** - AED Inbetriebnahme, Einweisung und Training:

Praktisches Training in der Anwendung des AED an einer Puppe, innerhalb der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW), für eine Gruppe von bis zu 12 Personen, über ca. 1,5 Std. - inkl. der Einweisung von 1-2 beauftragten Personen nach MPBetreibV in die technischen Spezifikationen des AED. Funktionskontrolle und Inbetriebnahme des AED sowie Erstellung eines Medizinproduktebuches inkl. Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll gemäß §10 MPBetreibV.

## 👥 **Premium Intensiv Paket** - AED Intensivtraining:

Intensivtraining in der Anwendung des AED an einer Puppe, innerhalb der HLW, für eine Gruppe von bis zu 8 Personen, über ca. 4 Std. - inkl. der Einweisung von 1-2 beauftragten Personen nach MPBetreibV in die technischen Spezifikationen des AED. Funktionskontrolle und Inbetriebnahme des AED, sowie Erstellung eines Medizinproduktebuches inkl. Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll gemäß §10 MPBetreibV.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Schulungsdauer	Schulungsteiln.	AED-Schulung in der Anwendung	Preis/VE
9990-121	Basic Paket - Inbetriebnahme und Einweisung	-	-	Nein	99,00 €
9990-021	Premium Paket - Inbetriebnahme, Einweisung u. Training	ca. 1,5 Std.	max. 12 Personen	Ja	249,00 €
9990-221	Premium Intensiv Paket - Inbetriebnahme, Einweisung u. Intensivtraining	ca. 4 Std.	max. 8 Personen	Ja	599,00 €

\*Ein Medizinprodukt ist alles, das im Rahmen medizinischer Maßnahmen beim Menschen eingesetzt wird, der Vorhütung, Erkennung, Behandlung, Überwachung oder Linderung dient und kein Arzneimittel ist. § 4 Abs. 3 der MPBetreibV schreibt eine grundsätzliche Einweisungsverpflichtung in die Handhabung eines Medizinproduktes vor. Aufgrund von Erfahrungen in der Praxis wird eine solche Verpflichtung aus Gründen der Patientensicherheit für erforderlich gehalten. Weitere Infos: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/faq-mpbetreibv.html>



# RETTUNGSMABNAHMEN BEI PLÖTZLICHEM HERZSTILLSTAND




- 1** Bewusstsein und Atmung prüfen
- 2** 112 anrufen, Oberkörper freimachen
- 3** Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen
- 4** AED holen lassen
- 5** Sprachanweisungen des AED folgen

## AED TRAINING

**Lebensrettung ist einfacher als man denkt!**

Möchten Sie trotzdem für den Notfall vorbereitet sein? Wir bieten eine große Auswahl an Trainingsequipment für das Training mit einem AED und HLW-Training (Herz-Lungen-Wiederbelebung).

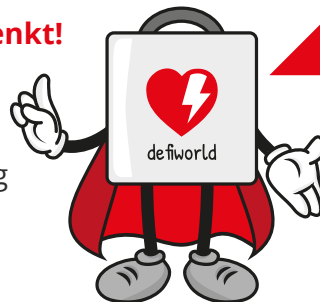


HLW sollte regelmäßig trainiert werden



Entdecken Sie unsere Produkte zum Thema AED- und HLW-Training unter:  
[www.defiworld.de/training/](http://www.defiworld.de/training/)





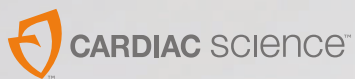

Unser gesamtes Produktsortiment zu den Themen Erste Hilfe, Betriebshygiene, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin finden Sie unter [www.medical-industrie.de](http://www.medical-industrie.de)

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer sowie Versandkosten.  
Bitte beachten Sie unsere AGBs. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.*



**Medical Industrie GmbH & Co KG**  
Marie-Curie-Straße 16  
40822 Mettmann  
Deutschland

T +49 2104 1775-0  
F +49 2104 1775-177  
[shop@defiworld.de](mailto:shop@defiworld.de)  
[www.defiworld.de](http://www.defiworld.de)



[f @defiworld.de](https://www.facebook.com/defiworld.de) [t @defiworld\\_de](https://twitter.com/defiworld_de)

*defiworld ist eine eingetragene Marke der Medical Industrie GmbH & Co. KG*